

# MAGICline

## Montage- und Bedienungsanleitung Assembly and operating guidelines

Vision

Projektion

Konzeption

Interaktion

Innovation

Rehabilitation



Gesellschaft für Planung und Vertrieb  
von Rehabilitationshilfen mbH



## Inhalt

1.	<b>Einleitung</b>	4
2.	<b>Verwendungszweck</b>	5
3.	<b>Anwendungsgebiet</b>	5
4.	<b>Grundausrüstung / Lieferumfang</b>	6
5.	<b>Anpassen der Sitzschale an den Patienten</b>	7
5.1.	Verstellen der Sitzbreite	7
5.2.	Verstellen der Sitztiefe	7
5.3.	Verstellen der Rückenhöhe	8
5.4.	Verstellen der Rumpfführungspelotten	8
6.	<b>Bedienung</b>	9
6.1.	Aufsetzen / Abnehmen der Sitzschale mittels Trapezadapter	9
6.2.	Aufsetzen / Abnehmen der Sitzschale mittels Arretierbolzen	10
6.3.	Verstellen des Rückenwinkels	11
7.	<b>Optionale Ausstattung</b>	12
7.1.	Becken-Sicherheitsgurt	12
7.2.	Brustgurt	12
7.3.	Hosenträgergurt 4-Punkt	13
7.4.	Brustschulterpelotte	13
7.5.	Kopfstützensysteme	14
7.6.	LWS-Anstützung	14
7.7.	Armlehnen	14
7.8.	Abduktionskeil (Spreizkeil)	14
7.9.	Rumpfführungspelotten	15
7.10.	Abschwenken der Rumpfführungspelotten	15
8.	<b>Reinigungs- und Pflegehinweise</b>	16
9.	<b>Technische Daten</b>	17
10.	<b>Sicherheitshinweise</b>	19
11.	<b>Garantie</b>	21
12.	<b>Konformitätserklärung</b>	22

## Contents

1.	<b>Introduction</b>	4
2.	<b>Intended use</b>	5
3.	<b>Application</b>	5
4.	<b>Basic equipment / scope of delivery</b>	6
5.	<b>Adaptation of the seat shell to the patient's needs</b>	7
5.1.	Adjustment of width of seat	7
5.2.	Adjustment of depth of seat	7
5.3.	Adjustment of height of seat	8
5.4.	Adjustment of trunk guiding pressure pad	8
6.	<b>Operation</b>	9
6.1.	Attachment and removal of the seat shell via adapter plate	9
6.2.	Attachment and removal of the seat shell via locking pin	10
6.3.	Adjustment of the rear angle	11
7.	<b>Optional equipment</b>	12
7.1.	Safety belt for pelvis	12
7.2.	Belt for the breast	13
7.3.	Brace Belt 4-point	13
7.4.	Pressure pad for breast and shoulder	13
7.5.	Headrest systems	14
7.6.	LWS support	14
7.7.	Armrests	14
7.8.	Abduction wedge (spreading wedge)	14
7.9.	Trunk guiding pressure pads	15
7.10.	Swivelling the trunk guiding pressure pads	15
8.	<b>Cleaning and servicing instructions</b>	16
9.	<b>Technical data</b>	17
10.	<b>Safety instructions</b>	18
11.	<b>Warranty</b>	21
12.	<b>Declaration of conformity</b>	23

## 1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für das Sitzsystem MAGICLINE der Firma interCo GmbH entschieden!

Um Ihnen den Umgang mit dem Produkt zu erleichtern haben wir die Handhabung der einzelnen Bauteile in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass auch Beschreibungen von Bauteilen aufgeführt sind, die unter Umständen nicht an Ihrem Produkt vorhanden sind. Wichtig ist die individuelle Anpassung an die Bedürfnisse der betroffenen Person. Um hier vielen Ansprüchen gerecht zu werden, ist auch die Liste des Zubehörs sowie der jeweiligen Beschreibungen etwas umfangreicher. Bitte lesen Sie die Teile die auf Ihr spezielles Modell zutreffen sorgfältig durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an uns oder Ihren Fachhändler.

MAGICLINE ist ein modulares mitwachsendes Sitzschalensystem bestehend aus Sitz- und Rückenteil aus Aluminium, in verschiedenen Größen. Dieses Sitzsystem ist innerhalb der angegebenen Größe variabel einstellbar: Die stufenlose Sitztiefen- und Sitzbreitenregulierung erfolgt über Langlöcher im Aluminiumkorpus. Die Rückenlehne ist ebenfalls variabel einstellbar. Umfangreiches Sitzschalenzubehör, wie z.B. Armlehnen, Kopfstütze, Rumpfführungen, Abduktionskeil, Fixierungshilfen sowie Therapie-tische in verschiedenen Ausführungen können angebracht werden.

MAGICLINE ist zur individuellen Abstimmung auf die Bedürfnisse des Patienten auf unterschiedliche Untergestelle für den Innen- und Außenbereich montierbar. MAGICLINE ist eine Sitzhilfe, die der Kompensation ausgeprägter Sitzfehlhaltung und/oder Sitzhaltungsinstabilitäten dient und insbesondere für Kinder eingesetzt werden soll.

Eine Größenanpassung im Wachstum soll zusätzlich ermöglicht werden. Die Konstruktion dieses aktiven Sitzsystems in 3 Größen, ermöglicht stufenlose Verstellbarkeit in Tiefe, Breite und Höhe.

## 1. Introduction

Congratulations, you have chosen the MAGICLINE seating system by InterCo GmbH.

In order to ease the handling of the product for you, we described the application of the different components in the following user manual. Please be appreciative of the fact that we also describes parts that might not be found in on your product. Most important is the individual fitting to the patient's needs. In order to satisfy most claims, the list of described items is a little more comprehensive. Please read the parts that apply to your specific model carefully and keep the user manual for later consulting.

For further questions please contact us or your specialised dealer.

MAGICLINE is a modular, simultaneously growing seat shell system comprising an aluminium seat and back element; different sizes are possible. That seat system can be adjusted variably within the size specified: The continuous regulation of widths and heights of a seat is effected via longitudinal holes in the aluminium body. The backrest can also be set variably. Comprehensive seat shell accessories like e.g. armrests, headrest, trunk guides, abduction wedge, fixation aids as well as therapeutic desks in different designs can be attached.

MAGICLINE can be mounted for the individual harmonization with the patient's needs with different underframes for internal and external areas. MAGICLINE is a seat aid which supports the compensation of a distinct abnormal posture and/or sitting posture instabilities and should mainly be used for children.

An adaptation in growth should additionally be made possible. The design of this active seat system in 3 sizes permits the continuous adjustment of depth, width and height.

MAGICLINE ist über den Trapezadapter mit unseren Untergestellen ROOMY, ROOMY NEW EDITION, ROADY, STREETY und SIMPLY kombinierbar. Darüber hinaus kann MAGICLINE auch an die meisten Untergestelle anderer Hersteller angepasst werden.

Wir von interCo geben Ihnen selbstverständlich die Gewährleistung für die Ersatzteilbeschaffung oder Neuanpassung über Jahre.

## 2. Verwendungszweck

MAGICLINE ist ausschließlich als funktionale Unterstützung der Sitzhaltung des Patienten im Rahmen einer Sitzschalenversorgung einzusetzen. MAGICLINE ist auf Rollstühle und Untergestelle montierbar.

## 3. Anwendungsgebiet

Diese Sitzhilfe kommt zur Anwendung bei Patienten, bei denen die Einnahme der Sitzposition entweder erschwert oder im physiologischen Sinne gestört oder aufgrund von anatomischen Veränderungen unmöglich ist, weil das Zusammenspiel von Becken und Wirbelsäule entweder durch angeborene bzw. erworbene Deformierung des Halteapparates (knöcherne bzw. Gelenkstrukturen) oder durch angeborene bzw. erworbene Insuffizienzen des Bewegungsapparates, des Beckens und/oder der Wirbelsäule funktionelle Defizite aufweist.

Verlust der Körperfunktionen durch Spastik, Athetose, Querschnittslähmung, Plegien, Hypertonien, Hypotonie, alle Muskelerkrankungen z.B. Muskeldystrophie, Skelettfehlbildungen und Verlust der Extremitäten, alle neurologischen Erkrankungen sowie alle Formen von geistiger Behinderung. Kompensation ausgeprägter Sitzfehlhaltungen und /oder Sitzhaltungsinstabilitäten.

Ermöglichen eines dauerhaften, beschwerdefreien Sitzens in physiologischer Haltung. Bei erheblich geminderter oder fehlender Stabilität des Rumpfes bzw. mit ausgeprägter Rumpfdeformität ermöglichen von korrigiertem und entlastetem Sitzen.

MAGICLINE can be combined with our underframes ROOMY, ROOMY NEW EDITION, ROADY, STREETY and SIMPLY via the trapezoidal adapter. Further, MAGICLINE can be adapted to most underframes of other manufacturers.

We, the staff of interCo, of course issue the warranty for the procurement of spare parts or new adaptation over years.

## 2. Intended use

MAGICLINE is exclusively meant as a functional support of the patient's sitting posture within the scope of a seat shell supply. MAGICLINE can be mounted to wheel chairs and underframes.

## 3. Applications

This sitting aid is applied by patients whose taking of a sitting posture is aggravated or disturbed in a physiological sense or impossible due to anatomic modifications, because the interrelationship between pelvis and spine has functional deficits either by hereditary or acquired deformation of the posture apparatus (bony or joint structures) or hereditary or acquired insufficiencies of the locomotor system, pelvis and/or spine.

Loss of body functions by spasticity, athetosis, paraplegia, plegiae, hypertonies, hypotony, all muscular diseases, e.g. muscular dystrophy, skeleton abnormalities and loss of extremities, all neurological diseases as well as all forms of mental handicaps. Compensation of distinct abnormal sitting postures and / or sitting posture instabilities.

Permitting permanent painless sitting in physiological posture. In case of considerably reduced or missing stability of the trunk or distinct trunk deformity corrected or relieved sitting becomes possible.

#### 4. Grundausrüstung

MAGICLINE wird von Ihrem Fachbetrieb individuell an den Patienten angepasst und vormontiert geliefert. Nach dem Entfernen der Transportverpackung können Sie Ihre neuen MAGICLINE sofort einsetzen. Gegebenen Falles sind Zubehörteile oder Optionen gemäß der Anleitung unter der Rubrik Optionale Ausstattung zu montieren.

MAGICLINE ist in drei Größen erhältlich:

Größe 1, Art.-Nr. 38001  
bis Körpergröße 120cm;

Größe 2, Art.-Nr. 38002  
bis Körpergröße 135 cm;

Größe 3, Art.-Nr. 38003  
bis Körpergröße 150 cm

Farbe: Brillantsilber;

Stoff: Black Malo CS , schwarz

##### Lieferumfang

Sitz- und Rückeneinheit aus Aluminium, pulverbeschichtet in Brillantsilber, mit physiologischen Drehpunkten. Inklusive stufenloser Sitztiefen- und Sitzbreitenregulierung über Langlöcher, variabel einstellbarer Rückenlehne, Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder, höhen- und breitenverstellbare Rumpfführungspelotten, Trapezadapter zur Befestigung der Sitzeinheit für Untergestelle mit Trapezadaptersaufnahme.

Bezug aus hochwertigem Polsterstoff „Black Malo CS“

Die Konstruktion der Sitzschale einschließlich Original Zubehör wird vom Fachbetrieb auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten ausgelegt und angepaßt. Bei Veränderungen hinsichtlich der Paßform, des Krankheitsbildes o.ä. sind ausschließlich durch den zuständigen Fachbetrieb entsprechende Nachpassungen vorzunehmen. Generelle Veränderungen in Form, Polsterung, Technik o.ä. dürfen nicht ohne Zustimmung des Herstellers vorgenommen werden, sie führen ansonsten zum Verlust der Garantie.

#### 4. Basic equipment

MAGICLINE is adapted individually to the patient and delivered premounted. After the removal of the transport packing you can use your new MAGICLINE immediately. If applicable, the accessories or options must be mounted in compliance with instructions in the section „Optional equipment“.

MAGICLINE can be purchased in three sizes:

size 1, item no. 38001  
for a body height of up to 120 cm;

size 2, item no. 38002  
for a body height of up to 135 cm;

size 3, item no. 38003  
for a body height of up to 150 cm.

Colour: high-gloss silver;

cover: Black Malo CS, black

##### Scope of supply

Seat and back unit made of aluminium, powder-coated in high-gloss silver, including physiological turning points. Including continuous regulation of depth and height of seat via longitudinal holes, variably adjustable backrest, adjustment of rear angle via gas pressure spring, height or width adjustable trunk guiding pressure pads, trapezoidal adapter for the fastening of the seat unit for underframes including trapezoidal adapter mount.

Cover made of high-quality upholstery cloth „Black Malo CS“.

The design of the seat shell including original accessories is designed for and adapted to the patient's individual needs. In case of alterations to the fit, clinical picture or the like further adaptations may only be performed by the competent specialized company. General alterations as to form, upholstery, technique or the like may not be performed without the manufacturer's consent; otherwise such alterations will result in a loss of guarantee.

## 5. Anpassen der Sitzschale an den Patienten

**Achtung:** Veränderungen hinsichtlich der Paßform, des Krankheitsbildes o.ä. sind ausschließlich durch den zuständigen Fachbetrieb auszuführen!

### 5.1. Verstellen der Sitzbreite




Lösen Sie die vier Einstellschrauben zur Sitzbreitenverstellung an der Unterseite der Sitzschale mit einem Innensechskant-Schlüssel gerade so weit, das sich die Verbindung bewegen lässt (1). Ebenso lösen Sie die Einstellschrauben an der Rückseite der Sitzschale (2), je zwei Stück unten an jeder Seite (3). Nun können Sie die Sitzbreite auf das gewünschte Maß einstellen.

Ziehen Sie anschließend die Schrauben wieder an. Prüfen Sie nach Abschluss der Einstellarbeiten alle Verbindungen auf festen Sitz.

### 5.2. Verstellen der Sitztiefe

Lösen Sie die Einstellschrauben zur Sitztiefenverstellung an der Unterseite der Sitzschale mit einem Innensechskant-Schlüssel gerade so weit, das sich die Verbindung bewegen lässt (3). Danach lösen Sie die Klettverbindung der Sitzpolsterung (4), jetzt können Sie die Sitztiefe auf das gewünschte Maß einstellen.

Ziehen Sie die Schrauben wieder an und befestigen das Sitzpolster mit dem Klettband. Prüfen Sie nach Abschluss der Einstellarbeiten alle Verbindungen auf festen Sitz.

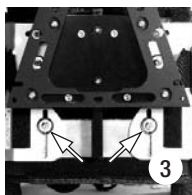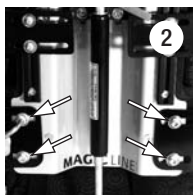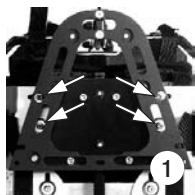

## 5. Adaptation of the seat shell to the patient

**Attention:** Alterations as to fit, clinical picture or the like may only be performed by the competent specialized company!

### 5.1. Adjustment of width of seat

Loosen the four setscrews for the adjustment of the seat width on the lower side of the seat shell by means of a hexagon socket screw key such that the connection can be moved (1). Also loosen the setscrews on the back of the seat shell (2), two pieces each at the bottom on each side (3). Then you can set the width of seat to the dimension desired.

Following that, tighten the screws again. Upon completion of the setting works check all connections for firm fit again.

### 5.2. Adjustment of depth of seat

Loosen the setscrews for the adjustment of depth of seat at the bottom of the seat shell by means of a hexagon socket screw key just so far that the connection can be moved (3). Then loosen the bur-type connection of the seat upholstery (4), and then you can set the depth of seat to the dimension desired.

Tighten the screws again and fasten the seat upholstery by means of the bur-type tape. Upon completion of all setting works check all connections for firm fit.

**Achtung:** Veränderungen hinsichtlich der Passform, des Krankheitsbildes o.ä. sind ausschließlich durch den zuständigen Fachbetrieb auszuführen!

### 5.3. Verstellen der Rückenhöhe

Lösen Sie die vier Schrauben zur Höhenverstellung an der Rückseite der Sitzschale mit einem Innensechskant-Schlüssel gerade so weit, das sich die Verbindung bewegen lässt (1). Danach lösen Sie die Klettverschlüsse der Rückenpolsterung (2).

Stellen Sie nun die Sitzhöhe auf das gewünschte Maß ein und ziehen Sie alle Schrauben wieder fest.

Prüfen Sie nach Abschluss der Einstellarbeiten alle Verbindungen auf festen Sitz!

### 5.4. Verstellen der Rumpfführungspelotten

Die Rumpfführungspelotten (Thoraxpelotten) (3) lassen sich sowohl in der Höhe als auch in ihrem seitlichen Abstand zum Patienten verstellen. Die Einstellschrauben befinden an der Rückseite der Sitzschale, je zwei an jeder Pelotte.

Lösen Sie die Einstellschrauben mit einem Innensechskant-Schlüssel gerade so weit, das sich die Verbindung bewegen lässt (4). Nun können Sie die gewünschte Einstellung in Höhe und Seitenabstand vornehmen und ziehen Sie alle Schrauben wieder fest.

Prüfen Sie nach Abschluss der Einstellarbeiten alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Attention:** Alterations as to fit, clinical picture or the like may only be performed by the competent specialized company!

### 5.3. Adjustment of backrest height

Loosen the four setscrews for the adjustment of the height of seat on the rear of the seat shell by means of a hexagon socket screw key just so far that the connection can be moved (1). Then loosen the bur-type connection of the back upholstery (2).

Following that, you can set the height of seat to the dimension desired and tighten all screws.


Upon completion of all setting works check all connections for firm fit.

### 5.4. Adjustment of the trunk guiding pressure pads

The trunk guiding pressure pads (3) (thorax pressure pads) can be adjusted as to height as well as to their lateral distance to the patient. The setscrews are found on the back of the seat shell, two each at each pressure pad.

Loosen the setscrews by means of a hexagon socket screw key just so far that the connection can be moved (4). Then you can set height and lateral distance desired and tighten the screws again.

Upon completion of all setting works check all connections for firm fit.

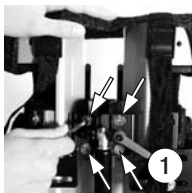



## 6. Bedienung

### 6.1. Aufsetzen / Abnehmen der Sitzschale mittels Trapezadapter

#### Aufsetzen der Sitzschale

Die Sitzschale wird mit Hilfe des Trapezadapters auf der Adapterplatte des Untergestelles, bzw. des Rollstuhles fixiert (1). Führen Sie hierzu nachfolgende Arbeitsschritte durch und prüfen Sie nach dem Aufsetzen der Sitzschale deren sicheren Halt auf der Adapterplatte.



Entriegeln Sie zunächst die Sitzschalenfixierung (2). Setzen Sie das hintere Ende des Sitzschalenadapters auf die vordere Seite der Adapterplatte, sodass die Verriegelung nach unten gedrückt wird (3).

Schieben Sie nun die Sitzschale nach hinten, bis diese deutlich hörbar einrastet (4). Verriegeln Sie die Sitzschalenfixierung wieder (5).

Zu guter Letzt überprüfen Sie die Sitzschale und die Sitzschalenverriegelung auf ihren festen Halt (6).

**Achtung:** Im Beispiel sehen Sie den Trapezadapter des Untergestelles ROOMY NEW EDITION. Unter Umständen unterscheidet sich dieser von Ihrer Versorgung.

**Achtung:** Das Aufsetzen der Sitzschale auf den Rollstuhl darf nur ohne Patient vorgenommen werden.

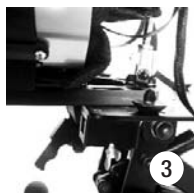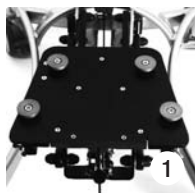

## 6. Operation

### 6.1. Attachment and removal of the seat shell via adapter plate

#### Attaching the seat shell

The seat shell is fixed to the adapter plate of the underframe or wheel chair by means of the trapezoidal adapter (1). For that purpose perform the subsequent steps and check the firm fit on the adapter plate after the seat shell has been placed.

First unlock the seat shell fixation (2). Set the rear end of the seat shell adapter to the front of the adapter plate such that the locking is pressed downward (3).

Then push the seat shell backwards until it engages audibly (4). Lock the seat shell fixation again (5).

Finally, check the seat shell and the seat shell catch for firm fit (6).

**Attention:** The example shows the trapezoidal adapter of the underframes of the ROOMY NEW EDITION. Differences between this adapter and your item may occur.


**Attention:** The placing of the seat shell on the wheel chair may only be performed without patient.

## Abnehmen der Sitzschale

Lösen Sie zunächst die Sicherung (1). Öffnen Sie die Sitzschalenverriegelung, indem Sie den Hebel nach oben drücken (2). Jetzt können Sie die Sitzschale nach vorne herausziehen.

**Achtung:** Das Abnehmen der Sitzschale vom Rollstuhl darf nur ohne Patient vorgenommen werden.

**Achtung:** Im Beispiel sehen Sie den Trapezadapter des Untergestelles ROOMY NEW EDITION. Unter Umständen unterscheidet sich dieser von Ihrer Versorgung.

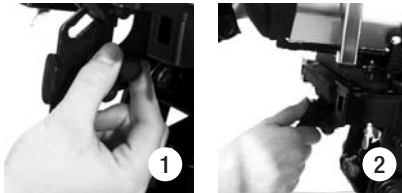

## Removing of the seat shell

First loosen the protective device (1). Open the seat shell catch by pressing the lever upwards (2). Then you can pull out the seat shell to the front.

**Attention:** The removal of the seat shell from the wheel chair may only be performed without patient.

**Attention:** The example shows the trapezoidal adapter of the underframes of the ROOMY NEW EDITION. Differences between this adapter and your item may occur.

## 6.2. Aufsetzen / Abnehmen der Sitzschale mittels Arretierbolzen

Zum Montieren einer Sitzschale gehen Sie wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie ob der Entriegelungsknopf eingerastet ist. Sie sehen dies daran, dass der Verriegelungszapfen oben aus der Trapezadapterplatte heraussteht. Ist dies nicht der Fall, drehen Sie so lange am Entriegelungsknopf, bis dieser einrastet.
2. Setzen Sie die Sitzschale mit dem hinteren Teil des Trapezadapters auf der Trapezadapterplatte auf. Schieben Sie die Sitzschale (damit auch den Trapezadapter) in die hintere Position, bis der Verriegelungsmechanismus hörbar einrastet.

**Wichtig:** Prüfen Sie immer, ob die Sitzschale fest im Trapezadapter sitzt. Sie prüfen dies durch Ziehen an der Sitzschale und gleichzeitigem Drücken am Untergestell. Die Sitzschale darf nicht heraus rutschen.

## 6.2. Attachment and removal of the seat shell via locking pin

In order to fix the seat shell please follow these steps:

1. Check whether the release button is locked in. If yes, the locking pin should reach out on top of the adaptor plate. If not, turn the locking pin until it locks.
2. Position the seat unit with the rear part of the trapezoidal adaptor on the trapezoidal plate. Push the seat unit (and thereby the trapezoidal adaptor) backwards into the trapezoid plate until the locking pin engages audibly

**Important:** Check that the seat shell and the lock are firmly fixed by pulling the seat while pushing the undercarriage. The seat shell should not slide out.

Zur Entnahme der Sitzschale gehen Sie in folgender Weise vor:


- Entriegelungsknopf nach unten ziehen und um 90° drehen. Dadurch bleibt der Entriegelungsknopf in der entriegelten Position stehen. Der Verriegelungszapfen steht nicht heraus!
- Ziehen Sie vorne an der Sitzschale, sie rutscht nun aus der Trapezadaptersaufnahme heraus.
- Nehmen Sie die Sitzschale vom Untergestell herunter.
- Drehen Sie den Entriegelungsknopf so lange, bis er hörbar einrastet.

### 6.3. Verstellen des Rückenwinkels

Der Rückenwinkel lässt sich komfortabel mit Hilfe der Gasdruckfeder an der Rückseite der Sitzschale verstellen (3).

Drücken Sie den Hebel am unteren Ende der Gasdruckfeder und stellen Sie den Rückenwinkel stufenlos von Hand ein (4).

Wenn Sie den Hebel los lassen, ist der Einstellwinkel fixiert.

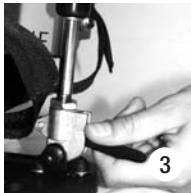

To remove the seat shell proceed as follows:

- Pull the locking pin downward and turn by 90°. This way the locking pin will remain in its unlocked position.
- Open the seat shell fixation by pushing down the lever. Now you can pull the seat shell out towards the front.
- Remove the seat shell from the undercarriage.
- Turn the locking pin until it locks audibly.

### 6.3. Adjustment of the back angle

The rear angle can be adjusted comfortably by means of the gas pressure spring on the rear of the seat shell (3).

Press the lever at the lower end of the gas pressure spring and manually set the rear angle continuously (4).

When the lever is released, the setting angle is fixed.

## 7. Optionale Ausstattung

### Montage und Bedienung

#### 7.1. Becken-Sicherheitsgurt

MAGICLINE kann mit einem Beckengurt sowohl im 45°-Winkel (1) als auch in einem Winkel von 70° (2) ausgestattet werden.

Ein Gurt wird im 45°-Winkel montiert, indem Sie eine Gurthalterung an dem hinteren Gewindebohrung montieren und den Gurt zwischen Rückenlehne und Seitenteilen einführen (3).

Eine Montage im 70°-Winkel erfolgt an der Unterseite der Seitenteile, indem Sie eine Gurthalterung zwischen beiden Gewindebohrungen einbauen und den Gurt durch die dafür vorgesehenen Führungsschlitze an der Unterseite der Seitenteile ziehen und diesen dann zwischen Seitenteilen und Sitzfläche nach oben führen (4).



## 7. Optional equipment



### mounting and operation

#### 7.1. Safety belt for the pelvis

MAGICLINE can be equipped with a belt for the pelvis at a 45°-angle (1) as well as a 70°-angle (2).

A belt is mounted at a 45°-angle after a belt holding device has been mounted to the rear threaded bore and the belt is inserted between backrest and lateral parts (3).

Mounting at the 70°-angle is performed on the lower side of the lateral parts after a belt holding device has been mounted between the two threaded bores and the belt is inserted through the guiding slots provided on the lower side of the lateral parts and moved upwards between lateral parts and seat area (4).

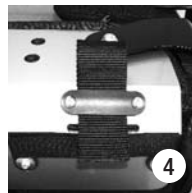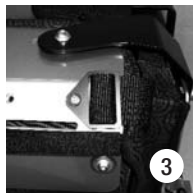

#### 7.2. Brustgurt

Zur Montage eines Brustgurtes, ist MAGICLINE mit einer Aufnahme an den seitlichen Rumpf-führungspelotten (Thoraxpelotten) ausgestattet. Befestigen Sie den Brustgurt an den dafür vorgesehenen Gewindebohrungen (5).



#### 7.2. Belt for the breast

To mount a belt for the breast MAGICLINE is provided with a mount on the lateral trunk guiding pressure pads (thorax pressure pads). Fasten the belt for the breast to the threaded bores provided (5).


### 7.3. Hosenträgergurt 4-Punkt

Eine Montage des Hosenträgergurtes 4-Punkt erfolgt zum einen an der Unterseite der Seitenteile, indem Sie eine Gurthalterung zwischen beiden Gewindebohrungen einbauen und den Gurt durch die dafür vorgesehenen Führungsschlitze an der Unterseite der Seitenteile ziehen und diesen dann zwischen Seitenteilen und Sitzfläche nach oben führen.

### 7.4. Brustschulterpelotte

MAGICLINE kann mit unterschiedlichen Brustschulterpelotten ausgestattet werden. Die Befestigung ist bei den unterschiedlichen Ausführungen identisch. Die unteren Gurte der Brustschulterpelotte werden an den Befestigungen der Seitenteile an der Rückseite der Sitzschale befestigt und zwischen Rückenlehne und Sitzfläche nach vorne geführt (1). Oben werden Gurte in die Klappschnalle an der Rückseite der Sitzschale eingeführt und durch den Klappmechanismus fixiert (3).

Zum Festgürten des Patienten wird die Brustschulterpelotte an den Steckverbindern gelöst (2) um diese über den Patienten zu legen. Um die Pelotte in der Länge anzupassen, nutzen Sie die Klappschnalle an der Rückenlehne (3).

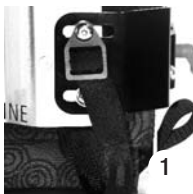

### 7.3. Brace Belt 4-point

Mounting at the brace belt 4-point is performed on the lower side of the lateral parts. After a belt holding device has been mounted between the two threaded bores, the belt is inserted through the guiding slots provided on the lower side of the lateral parts and moved upwards between lateral parts and seat area.

### 7.4. Pressure pad for breast and shoulders

MAGICLINE can be equipped with different pressure pads for breast and shoulders. Fastening is identical with the different designs. The lower belts of the pressure pads for breast and shoulders are fastened to the fastening elements of the lateral parts on the rear of the seat shell and moved to the front between backrest and seat area (1). At the top, the belts are inserted into the tilting buckle on the rear of the seat shell and fixed by the tilting buckle (3).

To fasten the patient's belt firmly the pressure pad for breast and shoulders is loosened at the connecting elements (2) to lay it over the patient. To adapt the pressure pad as to length, use the tilting buckle at the backrest (3).

## 7.5. Kopfstützensysteme

MAGICLINE kann mit unterschiedlichen Kopfstützensystemen ausgestattet werden. Im Beispiel sehen Sie das Kopfstützensystem der ALU-LINE. Befestigen Sie die Kopfstütze, indem Sie den Feststellhebel an der Kopfstützenaufnahme, welche sich am oberen Teil der Rückenlehne befindet (1), lösen, die Kopfstützenhalterung einführen und den Hebel wieder anziehen. Das selbe Verfahren wird angewandt, wenn die Kopfstütze durch eine Flügelschraube befestigt wird. Hier wird zuerst die Schraube gelöst, dann die Kopfstütze verstellt und anschließend die Schraube wieder fest angezogen (2).

## 7.6. LWS-Anstützung

MAGICLINE kann mit einer klettbaren LWS-Anstützung ausgerüstet werden.

Befestigen Sie diese einfach mit dem Klettverschluss unter dem Bezug der Rückenlehne in der therapeutisch erforderlichen Höhe (3).

## 7.7. Armlehnen

MAGICLINE kann mit unterschiedlichen Armlehnen ausgestattet werden.

Befestigen Sie die Armlehne, indem Sie den Feststellhebel an der Armlehnenaufnahme (4) rechts und links an den Seiten der Sitzschale lösen, die Armlehnen einführen und den Feststellhebel wieder anziehen.

## 7.5. Headrest systems

MAGICLINE can be equipped with different headrest pressure pads. The example shows the ALULINE headrest system. Fasten the headrest by loosening the fixing lever at the headrest mount found at the upper part of the backrest (1), inserting the headrest holding device and tightening the lever again. The same method is used when fixing the head rest with a wing screw. First the screw is loosened, the the head rest is adjusted, finally the screw is tightened once again (2).


## 7.6. LWS support

MAGICLINE can be equipped with a bur-type LWS support. Simply fasten it by means of a bur-type connection below the cover of the backrest at the therapeutically required height (3).

## 7.7. Armrests

MAGICLINE can be equipped with different armrests.

Fasten the armrest by loosening the fixing lever at the armrest mount (4) on the right and left on the sides of the seat shell, inserting the headrest holding device and tightening the lever again.

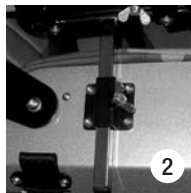

### 7.8. Abduktionskeil (Spreizkeil)

Abduktionskeile gibt es in zwei Ausführungen für die MAGICLINE, starr und abschwengbar. Beide werden auf den Halter aus Vierkantrohr an der Unterseite der Sitzschale aufgesteckt und mit Hilfe eines Feststellhebels fixiert (1).



### 7.8. Abduction wedge (spreading wedge)

Abduction wedges can be obtained in two designs for MAGICLINE, rigid and swivelling. Both are plugged onto the holding device (square pipe) to the lower side of the seat shell and fixed by means of a fixing lever (1).

### 7.9. Rumpfführungspelotten (Thoraxpelotten)

Hier sind zwei Ausführungen zur Montage an der MAGICLINE erhältlich.

Eine starre (2), sowie eine Ausführung mit Abschwengvorrichtung (3). Beide werden an den Aufnahmeschienen an der Rückseite der Sitzschale mit Hilfe zweier Innensechskantschrauben befestigt (2).



### 7.9. Trunk guiding pressure pads (thorax pressure pads)

For this item two designs can be obtained for assembly to MAGICLINE, a rigid one (2) and a design with swivelling device (3).

Both are fastened to the mount rails on the back of the seat shell by means of two hexagon socket screw keys (2).

### 7.10. Abschwengken der Rumpfführungspelotten

Lösen Sie die Arretierung, indem Sie den roten Knopf an der Seite der Pelotten drücken.

Nun lassen sich die Pelotten abschwengken. Beim Zurückschwengken der Pelotten rastet die Arretierung hörbar ein und fixiert so die Rumpfführungspelotte.

### 7.10. Swivelling the trunk guiding pressure pads

Loosen the catch by pressing the red button on the side of the pressure pads.

Then let the pressure pads swivel. When the pressure pads swing back, the catch is engaged audibly and thus the trunk guiding pressure pad is fixed.

## 8. Reinigungs- und Pflegehinweise

Sie können das Aussehen Ihrer wertvollen Heimtextilien selbst beeinflussen, indem Sie es

- regelmäßig reinigen; staubsaugen oder vorsichtig bürsten, bevor sich Schmutz festsetzt;
- verschüttete Flüssigkeiten sofort mit saugfähigem Material aufnehmen – je länger Sie damit warten, desto schwieriger wird die Reinigung! Meist hilft eine milde Feinwaschmittellösung, gering dosiert auf ein Tuch geben, und damit abtupfen (niemals kräftig reiben). Wichtig dabei: niemals diese Lösung direkt auf den Bezug geben, sondern immer nur auf das Tuch. Gegebenenfalls mit klarem Wasser leicht abreiben.

**Bitte beachten Sie:** Der Stoff darf nicht gechlort oder gebleicht werden. Das Gewebe sollte möglichst wenig direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.

Alle unsere Bezugstoffe sind bei 30°C waschbar. Benutzen Sie zur Wäsche ein Feinwaschmittel oder eine schonende chemische Reinigung.

Trocknen Sie den Bezug nicht im Trockner! Bügeln bei niedriger Temperatur (ein Punkt). Sollten Sie den Bezug der Sitzschale häufiger waschen wollen empfiehlt sich ein zweiter Bezug, den Sie dann im Wechsel aufziehen können. Fragen Sie hierzu in Ihrem Sanitätshaus nach. Die Zusatzteile reinigen Sie bitte mit einer haushaltsüblichen milden Seifenlauge.

Der Grundkorpus des MAGICLINE Sitzsystems ist mit einer hochwertigen, widerstandsfähigen Kunststoffbeschichtung versehen. Reinigen Sie diesen mit Seifenlauge und einem weichen Schwamm. Vermeiden Sie aggressive oder scheuernde Mittel, da dadurch die Oberfläche der Kunststoffbeschichtung beschädigt werden kann. Zur Desinfektion können alle für dieses Anwendungsgebiet üblichen Desinfektionsmittel eingesetzt werden.

## 8. Cleaning and servicing instructions

You can influence the appearance of your valuable home textiles yourself by

- regular cleaning, vacuum-cleaning or careful brushing before dirt gets stuck
- immediately taking up liquids by means of absorbent material – the longer you wait, the more difficult the cleaning becomes! In most cases a mild light-duty detergent is helpful, put it on a cloth (low dose) and use it for dabbing (never rub strongly). It is important that this solution is never put on the cover directly, but always on the cloth. If required, use clear water for slight rubbing.

**Please observe:** The cloth must be neither chlorinated nor bleached. The tissue should be exposed to direct sunlight as little as possible.

All our covering cloths can be washed at 30°. Use a light-duty detergent for washing or gentle chemical purification.

Do not dry the cover in a dryer! Should you wish to wash the cover of the seat shell more frequently, a second cover to be used alternately is recommended. Ask your medical supplier for that. Please clean additional parts by means of mild soapsuds and a soft sponge usually used in a household.

The basic corpus of the MAGICLINE seat system is provided with a high-quality resisting plastic coating. Clean the latter with soapsuds and a soft sponge. Avoid aggressive or rubbing agents, as they may damage the surface of the plastic coating. For disinfection all agents usually applied in this context can be used.



## 9. Technische Daten

### Abmessungen der MAGICLINE (Außenmaße)

	Breite ohne Armlehnen	Tiefe gesamt	Höhe mit Trapezadapter	Gesamtgewicht mit Trapezadapter ohne Patient
Gr. 1	30 - 35 cm	42 cm	44 - 50 cm	ca. 8 kg + ca. 2 kg für Kopfstütze und Armlehnen
Gr. 2	35 - 40 cm	47 cm	48 - 55 cm	ca. 9 kg + ca. 2 kg für Kopfstütze und Armlehnen
Gr. 3	40 - 45 cm	52 cm	53 - 60 cm	ca. 10 kg + ca. 2 kg für Kopfstütze und Armlehnen

### Abmessungen der MAGICLINE (Innenmaße)

	Breite	Tiefe	Höhe
Gr. 1	20 - 25 cm	20 - 25 cm	30 - 44 cm
Gr. 2	25 - 30 cm	26 - 31 cm	39 - 46 cm
Gr. 3	30 - 35 cm	32 - 37 cm	44 - 51 cm

	Rückenwinkelverstellung	max. Belastung	max. Körpergröße
Gr. 1	-5° bis +30°	25 kg	120 cm
Gr. 2	-5° bis +30°	35 kg	135 cm
Gr. 3	-5° bis +30°	45 kg	150 cm

## 9. Technical Data

MAGICLINE dimensions (outer dimensions)				
	Width without armrests	Depth all incl.	Hight incl. trapezoidal adapter	Weight incl. trapezoidal adapter without patient
Size 1	30 - 35 cm	42 cm	44 - 50 cm	approx. 8 kg + ca. 2 kg for head- and armrests
Size 2	35 - 40 cm	47 cm	48 - 55 cm	approx. 9 kg + ca. 2 kg for head- and armrests
Size 3	40 - 45 cm	52 cm	53 - 60 cm	approx. 10 kg + ca. 2 kg for head- and armrests

MAGICLINE dimensions (inner dimensions)			
	Width	Depth	Height
Size 1	20 - 25 cm	20 - 25 cm	30 - 44 cm
Size 2	25 - 30 cm	26 - 31 cm	39 - 46 cm
Size 3	30 - 35 cm	32 - 37 cm	44 - 51 cm

	Back angle	Maximum load	Maximum body height
Size 1	-5° bis +30°	25 kg	120 cm
Size 2	-5° bis +30°	35 kg	135 cm
Size 3	-5° bis +30°	45 kg	150 cm

## 10. Sicherheitshinweise



- Ein Transport des Patienten im Auto in der Sitzschale MAGICLINE ist zu keiner Zeit gestattet! Für den Transport im Auto verwenden Sie bitte spezielle Fahrzeugsitze, die den geltenden Vorschriften entsprechen. Die Sitzschale darf nur im unbesetzten Zustand transportiert werden.
- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Personen in Sitzschalen zu jedem Zeitpunkt mittels geeigneter Rückhaltesysteme (Begur-tung) gesichert sein müssen!
- Achten Sie stets darauf, dass die Sitzschale fest mit dem Untergestell verbunden und gesichert ist.
- Wenden Sie sich stets an Ihren Fachhändler oder an interCo, wenn Sie Fragen zu MAGIC-LINE haben.
- Unterziehen Sie sämtliche Verbindungen der MAGICLINE einer regelmäßigen Sichtkont-rolle. Konsultieren Sie im Zweifelsfall Ihren Fachhändler.
- Anbau von Zusatzteilen oder Veränderungen an MAGICLINE durch andere als den Herstel-ler sind nicht zulässig und können bei bekannt werden juristisch geahndet werden. Ebenso erlischt hierdurch die Gewährleistungspflicht der Fa. interCo GmbH, und es bestehen keine Haftungsansprüche mehr gegenüber dem Hersteller.
- MAGICLINE ist nur für den bestimmungsge-mäßen Gebrauch zugelassen.
- Sitzeinheiten dürfen nur in der vorgegebenen Richtung auf das Untergestell montiert wer-den.
- Benutzen Sie zum Ein- oder Aussteigen aus einem Sitzsystem nicht das Fußbrett. Dieses sollte vorher weggeklappt oder abgenommen werden.
- Zur Überwindung von Treppen muß der Pati-ent, das Sitzsystem und das Zimmerunterge-stell getrennt voneinander befördert werden.

## 10. Safety instructions



- A transport of the patient in a car in the seat shell MAGICLINE is not per-mitted at any time! Use special seats meeting applicable requirements for trans-port in a car. The seat shell may only be transported with nobody sitting in it.
- We'd like to point out expressly that persons in seat shells must be secured at any time by means of appropriate holding systems (belts)!
- Always pay attention that the seat shell is firmly connected to the underframe and se-cured.
- In case of questions related to the MAGI-CLINE do not hesitate to contact your special-ized dealer or InterCo.
- Perform a regular visual inspection of all MAGICLINE connections. If doubts occur, ask your specialized dealer.
- Attachments of accessories or alterations to MAGICLINE performed by others than the manufacturer are not allowed and can result in legal proceedings, if they become known. Further to that, the obligation of warranty by the company of InterCo GmbH expires and the manufacturer can no longer be held liable.
- MAGICLINE is approved for the intended use only.
- Seat units may only be mounted to the underframe in the direction prespecified.
- Do not use the footboard for entering or leav-ing the seat system. This should be tilted off or removed.
- To master stairs the patient, the seat system and the indoor underframe must be trans-ported separately. Carrying the indoor un-derframe including mounted seat system with the patient sitting in it is not allowed! Secure the patient against dropping out before any lifting or lowering operations as well as the adjustment of the sitting inclination.



Ein Tragen des Zimmeruntergestells mit montiertem Sitzsystem und darin sitzendem Patient ist unzulässig!

Sichern Sie vor allen Hebe- und Senkvorgängen, sowie vor Verstellen der Sitzneigung den Patienten vor dem Herausfallen.

- Um Verletzungen zu vermeiden, greifen Sie bei Verstellvorgängen niemals zwischen bewegliche Teile. Das Anhängen von Taschen ist unzulässig.
- Lassen Sie den Patienten niemals unbeaufsichtigt. Auch dann nicht, wenn er durch Begurtung gesichert ist.
- Bei sehr weitem Herauslehnen oder heftigen Bewegungen des Patienten besteht u. U. die Gefahr des Umkippens.
- Nach allen Einstellarbeiten die zuvor gelösten Verbindungen wieder gut schließen.
- Alle Rahmen- und Kunststoffteile nur mit milden Reinigungsmitteln säubern
- Alle unsere Bezugstoffe sind bei 30°C waschbar. Benutzen Sie zur Wäsche ein Feinwaschmittel. Trocknen Sie den Bezug nicht im Trockner!
- Der Bezug darf nicht chemisch gereinigt, gechlort oder gebleicht werden.



- To avoid injuries never put your hands between moving parts when performing adjustments. Suspending bags is not allowed.

- Never leave the patient without supervision, not even when he/she is secured by belts.
- Should the patient lean out very far or move strongly, the risk of overturning may occur.
- After all adjustment works lock connections which were loosened before again well.
- Only use mild cleaning agents for all frame and plastic elements.
- All our covers can be washed at 30°. Use a light-duty detergent for a wash. Do not dry the cover in a dryer!
- The cover must not be cleaned chemically, chlorinated or bleached.

## 11. Garantie

In Ergänzung zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen gewähren wir auf das von uns gelieferte Produkt MAGICLINE eine Garantie von 1 Jahr. Nach Einsendung der Garantiekarte gewähren wir Ihnen zusätzlich ein weiteres Jahr Herstellergarantie, so besteht dann eine Garantiezeit von insgesamt 2 Jahren. Unbrauchbare oder schadhafte Teile werden innerhalb der Gewährleistungsfrist repariert oder unentgeltlich ersetzt. Ausgeschlossen hiervon sind entwicklungsbedingte Änderungen sowie Verschleißteile (z.B. Gasdruckdämpfer oder Bezüge).

Für Schäden aufgrund von Kombinationen unseres Produktes mit Fremdprodukten jeglicher Art, die unter Umständen erhebliche Gefahren in sich bergen, können wir keine Haftung übernehmen. Ausgenommen hiervon sind nur ausdrücklich von unserem Hause freigegebenen Produkte anderer Hersteller.

Weiter ausgeschlossen sind Mängel, die aufgrund natürlichen Verschleißes, übermäßiger Beanspruchung, gewaltsamer und vorsätzlicher Beschädigung sowie nicht bestimmungsgemäßer Verwendung auftreten.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

## 11. Warranty

In addition to the general terms of business we grant a guarantee of one year for our product MAGICLINE. After returning the guarantee voucher we grant an additional year of manufacturer's guarantee, which means the total guarantee period is two years. Unusable or damaged parts will be repaired within the guarantee period or replaced free of charge. Development-related alterations or wearing parts (e.g. gas pressure damper or covers) are excluded.

We cannot be held liable for damage due to combinations of our product with third parties' products of any kind which may imply considerable risks. We expressly declare that third parties' products approved by us are excluded from that.

Defects resulting from natural wear, excessive strain, damage due to force or with premeditation as well as unintended use are excluded as well.

Subject to technical modifications.

### EG - KONFORMITÄTSERLÄRUNG FÜR MEDIZINPRODUKTE

**Name des Herstellers:** interCo GmbH  
Gesellschaft zur Planung und Vertrieb von  
Rehabilitationshilfen mbH

**Adresse des Herstellers:** Im Auel 50  
53783 Eitorf

#### Wir erklären hiermit, dass das Produkt

**Artikelbezeichnung:** MAGICLINE - Gr. 1-3  
**Typ:** modulares, mitwachsendes Sitzsystem  
Maße gemäß Tabelle,  
Ausstattung gemäß Definition

**Commission:** Serienfertigung

#### den einschlägigen Bestimmungen der nachstehenden Richtlinie entspricht:

- Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang I und VIII

Eitorf, den 05. Februar 2004



**Michael Markwald**  
Geschäftsführer

### EU DECLARATION OF CONFORMITY FOR MEDICAL PRODUCTS

**Manufacturer's name:** interCo GmbH  
Gesellschaft zur Planung und Vertrieb von  
Rehabilitationshilfen mbH

**Manufacturer's address:** Im Auel 50  
53783 Eitorf / Germany

#### We hereby declare that the product

**Name of product:** MAGICLINE - Gr. 1-3  
**Design:** modular, jointly growing seat system  
dimensions in compliance with table  
equipment according to definition

**Commission:** series production

#### meets the relevant provisions in the directive specified below:

- Directive 93/42/EWG on medical products, annex I and annex VIII

Eitorf, 5 February 2004



**Michael Markwald**  
Chief Executive





## Garantiekarte

Bei Einsendung dieser Karte gewähren wir auf Ihren MAGICLINE eine erweiterte Garantie von insgesamt 2 Jahren. Bitte füllen Sie diese Garantiekarte sorgfältig und vollständig aus und senden Sie diese an uns zurück – vielen Dank.

Kostenträger/Krankenkasse: \_\_\_\_\_  
Ort des Kostenträgers: \_\_\_\_\_  
Seriennummer: \_\_\_\_\_  
Lieferdatum: \_\_\_\_\_  
Name des Patienten: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Telefon\*: \_\_\_\_\_  
E-Mail\*: \_\_\_\_\_

\*freiwillige Angaben



## Guarantee postcard

If you send us this card, we can assure you an extended guarantee for your MAGICLINE for a total of 2 years. Please fill out this guarantee postcard carefully and completely and return it to us – thank you.

Cost bearer/Medical insurance: \_\_\_\_\_  
Cost bearer's location: \_\_\_\_\_  
Series number: \_\_\_\_\_  
Delivery date: \_\_\_\_\_  
Patient's name: \_\_\_\_\_  
Street: \_\_\_\_\_  
Postcode/Town: \_\_\_\_\_  
Telephone no.\*: \_\_\_\_\_  
e-mail\*: \_\_\_\_\_

\*Non-compulsory information

## Antwortkarte

ABSENDER

Name

Straße

PLZ/Ort

ANTWORT

interCo GmbH

Im Auel 50

53783 Eitorf - Germany



## Reply Card

ADDRESS

Name

Street

Postcode/Town

REPLY

interCo GmbH

Im Auel 50

53783 Eitorf - Germany

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



zertifiziert nach  
**DIN EN ISO 9001:**  
**2001 und DIN ISO 13485**  
Reg.-Nr. 73 105 357  
TÜV Hessen

Certified as per  
**DIN EN ISO 9001:**  
**2001 and DIN ISO 13485**  
Reg. No. 73 105 357  
TÜV Hesse



Gesellschaft für Planung und Vertrieb  
von Rehabilitationshilfen mbH

Im Auel 50 · 53783 Eitorf · Germany  
Phone: ++49 (0) 2243 / 88 07 0  
Fax: ++49 (0) 22 43 / 88 07 29  
E-mail: [info@interco-reha.de](mailto:info@interco-reha.de)  
[www.interco-reha.de](http://www.interco-reha.de)